


3M Skin & Wound Care Division

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Securement Dressing with Comfort Adhesive Technology

Tegaderm™ Brand

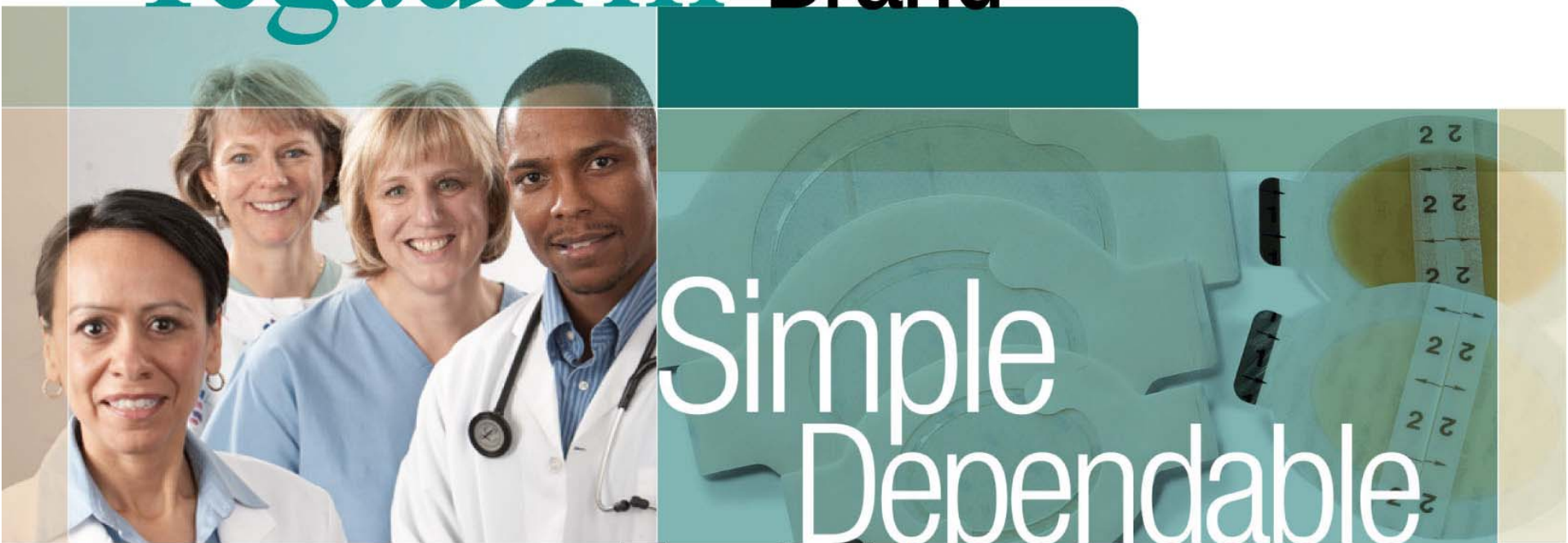

Simple  
Dependable

Trusted




# 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Securement Dressing with Comfort Adhesive Technology

## 穩定作用邊框

- 邊框附著力設計可增強固定性
- 減少翹邊情況維持敷料密封性
- 提供舒適性，外層有防水膜可抗髒汙，延長使用時間
- 表面特殊塗佈處理，使膠帶移除方便

## 固定力加強切口

- 協助整體敷料固定性
- 減少翹邊
- 操作程序較簡單\*(其他固定座相比)

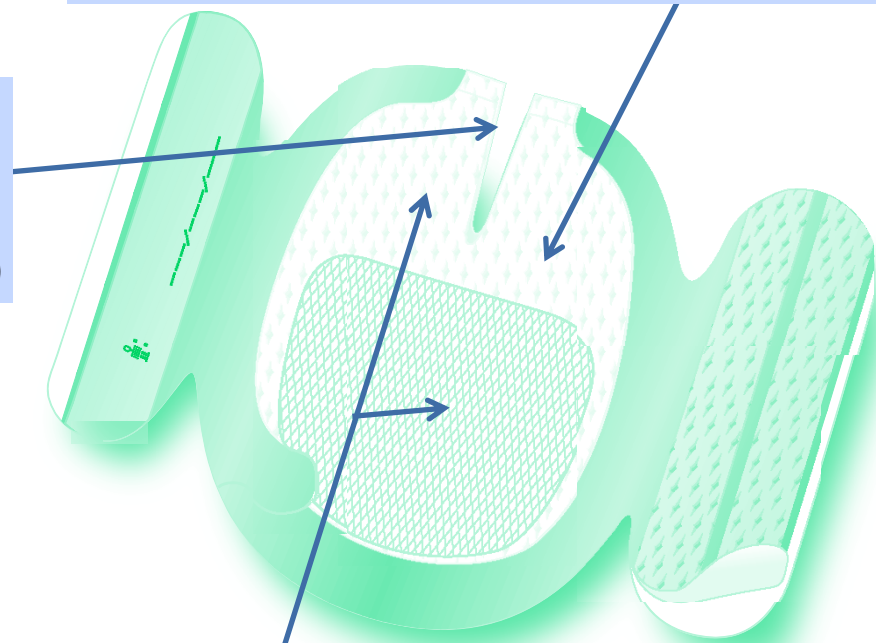

## 強力但溫和的雙重特性黏膠

- 網狀鍍膠技術兼顧黏性與透氣，有助於溼氣管理，且容易移除
- 邊框下的穩定膠系可將導管周圍密封，加強固定性
- 感壓性膠可服貼於皮膚，黏貼24小時後，固定力大幅增加
- 不含乳膠


# 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Securement Dressing with Comfort Adhesive Technology

## 標籤貼紙

- 預印式方便使用
- 紀錄換藥時間

## 框型設計

- 容易瞄準，置放正確
- No touch操作系統，不會碰觸黏膠無菌面，達到好拿、好放、好固定的效果

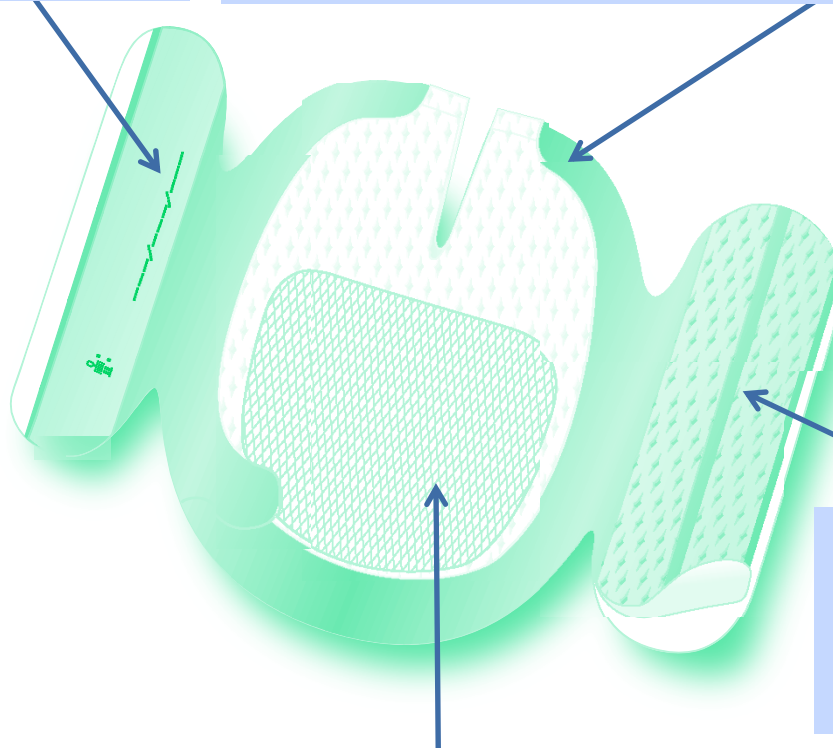

## 附加無菌膠帶

- 提供多合一固定系統
- 增加換藥標準化一致性與遵從性
- 預切式膠帶以方便固定輸注帽、導管與管路

## 防水透明薄膜


- 提供持續的部位觀察
- 可平順的貼附在皮膚上，減少對皮膚的張力
- 高透氣薄膜可增加皮膚表面水氣蒸發，進而增加敷料固定時間
- 防水，無菌屏障隔離外部的污染物，包括液體，細菌和病毒

**3M**

# 敷料建議應用範圍與選擇

## ■ 建議應用範圍

- Short peripheral & midline venous catheters
- Central venous catheters (CVC)
  - Internal jugular (IJ) vein
  - Femoral vein
  - Subclavian vein
- Peripherally inserted central catheters (PICCs)
- Tunneled CVCs
- Implanted infusion devices (ports)
- Arterial catheters
- Dialysis catheters
- Any percutaneous device

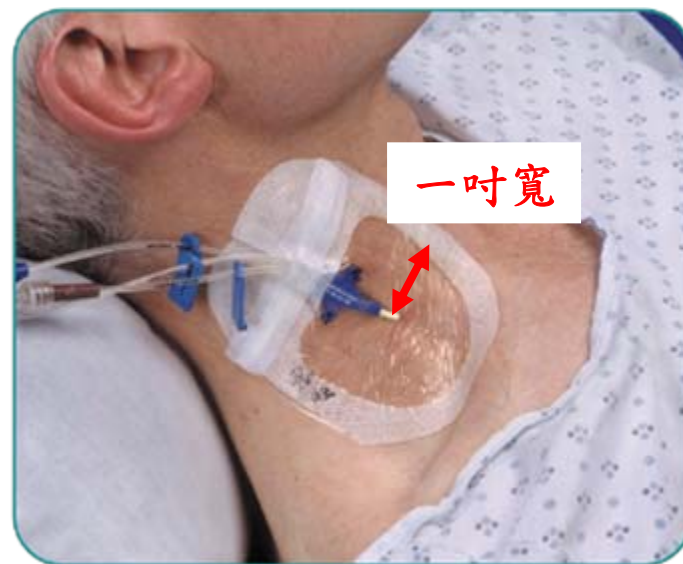

## ■ 敷料選擇

- 選擇一個夠大敷料，至少距離導管周圍一寸寬的健康乾燥皮膚

**3M**



# 1685 使用技巧



1.

Prepare the site according to your facility's protocol. Allow all preps and skin protectants to dry completely. Open package and remove sterile dressing.



2.

Peel liner from dressing, exposing adhesive surface. Flip dressing over so adhesive faces skin.



3.

Positioning notched side of dressing over catheter hub, place stabilization border over catheter "wings."



4.

Slightly overlap the stabilization border tabs under hub or lumens. Press transparent portion of dressing into place.



5.

While slowly peeling off paper frame, smooth dressing edges with fingertips.



6.

Smooth dressing from center towards edges, using firm pressure.



7.

Remove precut sterile tape strips from paper frame. Secure strips over top of stabilization border dressing and catheter hub, positioning strips parallel and close to one another.



8.

Stabilize any extensions and label dressing according to your facility's protocol.

## Taping Technique Alternative



Taping alternative for catheter securement for a Central Venous Catheter - IJ Site\* using 3M™ Medipore™ H Soft Cloth Surgical Tape.

**3M**

# 1685 移除技巧



1.

Remove tape strips applied to top of dressing.



2.

Separate stabilization border tabs and gently peel the dressing back toward insertion site.



3.

Slowly peel dressing back over itself while stabilizing catheter and supporting surrounding skin. A medical adhesive remover can be used if needed.

*3M™ Tegaderm™ LV Advanced Securement Dressing is not indicated to replace sutures for short-term C.V.C. catheters (e.g. jugular, subclavian, femoral).*

# 透明敷料撕除注意事項



1. 撕除時，需以一手壓住皮膚，慢慢撕除，切勿以90度垂直拉扯皮膚，須以180度平行皮膚方向撕除。
2. 敷料用於注射部位時，需由注射帽往注射部位方向撕除。
3. 用於一般皮膚時，需順毛非逆毛撕，由身體內部向外撕除。