


恩賦翠(Amvuttra)預充填式注射劑 25mg/0.5mL 注射流程

1. 準備用品


準備以下用品 (本包裝未提供)，放置在乾淨平坦的表面上：

- 酒精棉片
- 紗布或棉球
- 自黏繃帶
- 針頭收集盒

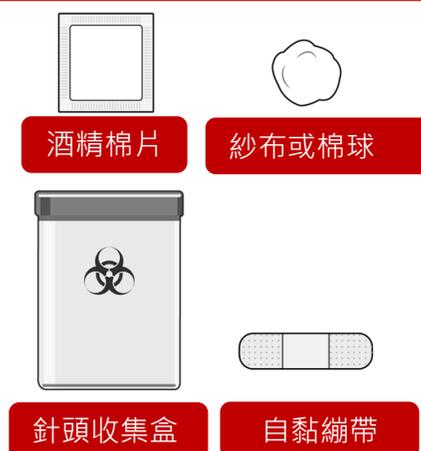

2. 準備注射器

- 如果注射器為冷藏存放，使用前至少 30 分鐘應回復至室溫。
- 抓住注射器筒身，從包裝中取出注射器。直到準備注射之前，請勿碰觸推桿。

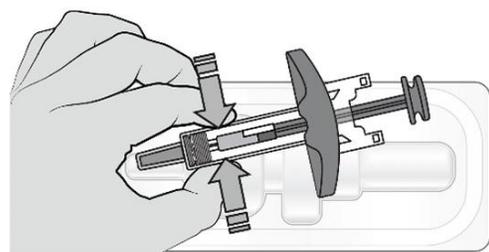


3. 檢查注射器

檢查：

- ✓ 注射器未受損，例如破裂或滲漏。
- ✓ 針頭蓋完好無損且套在注射器上。
- ✓ 注射器內的藥物溶液清澈，呈無色至黃色。
- ✓ 注射器標籤上印有「Amvuttra 25 mg」。
- ✓ 注射器標籤上印著有效日期。

注射器內有氣泡屬於正常現象。

如果在檢查注射器和藥物溶液時發現任何問題，請勿使用注射器。

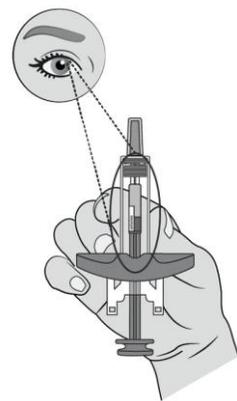


4. 選擇注射部位

從以下區域選擇注射部位：


- 腹部，不包括肚臍周圍 5 公分 (2 英吋) 的區域
- 大腿前側
- 如果由其他人進行注射，也可注射於上臂後側。

請勿注射到皮膚觸痛、發紅、腫脹、瘀青或變硬的區域，或肚臍周圍 5 公分 (2 英吋) 範圍內的區域。

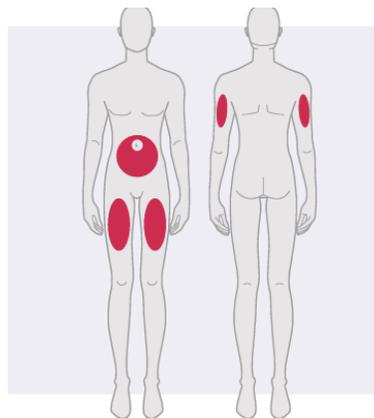


5. 準備注射

- 用肥皂和清水洗淨雙手，並用乾淨的毛巾徹底擦乾。
- 使用酒精棉片清潔選好的注射部位。等待皮膚自然乾燥後再注射。

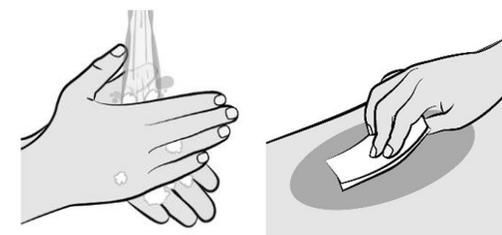


6. 取下針頭蓋

- 以單手握住注射器筒身。另一手將針頭蓋筆直拔掉，立即丟棄。
- 針尖出現液滴屬於正常現象。

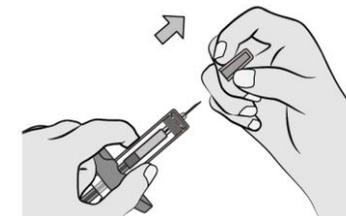


7. 插入針頭

一手輕輕捏住注射部位周圍清潔後的皮膚，使中間部位突起以便注射。以 45-90° 角將針頭完全插入捏起的皮膚。

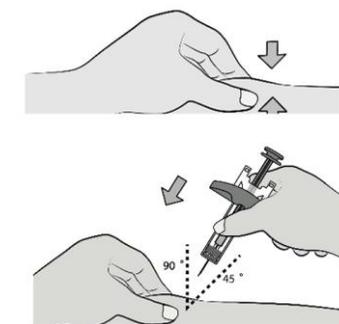


8. 注射藥物

- 手指夾住凸緣，同時以拇指墊將推桿往下按壓。
- 將推桿按壓到底，將藥物溶液注射完畢。

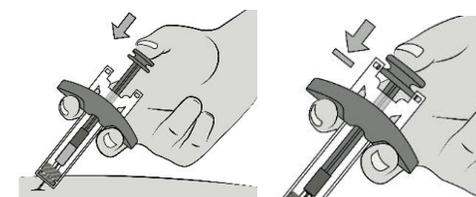

9. 放開推桿

放開推桿以蓋上針頭。從皮膚取下注射器。

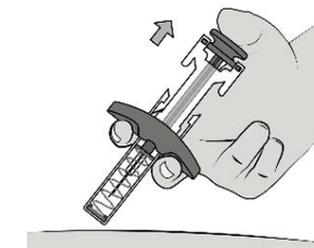

10. 檢查注射部位

- 注射部位可能有少量出血或液體。
- 如果有，請將紗布或棉球按壓在注射部位上，直到出血停止。
- 避免搓揉注射部位。



11. 丟棄注射器

將使用過的注射器立即丟棄至針頭收集盒。僅使用針頭收集盒收集丟棄的注射器。

