


使用說明書
杜避炎注射劑
DUPIXENT solution for injection
注射劑，皮下注射使用
附有針頭防護套的單劑量預填注射器

使用 DUPIXENT 預填注射器前，請先閱讀使用說明書。在未經示範該如何施打 DUPIXENT 之前，請勿自行注射或替他人注射。12 歲以上的青少年建議由成人或在成人的監督下使用 DUPIXENT。12 歲以下的兒童，應由照護者注射 DUPIXENT。在您第一次嘗試自行注射前，您的醫療人員可先向您或您的照護者示範如何準備和注射 DUPIXENT。

請保存這份說明書以作為未來使用。有任何問題嗎？請諮詢您的醫療人員。

這是一個單劑量的預填注射器（說明中稱之為“注射器”）。它內含 DUPIXENT 300 mg，注射於皮膚下（皮下注射）。

DUPIXENT 注射器的各個部位如下圖所示。

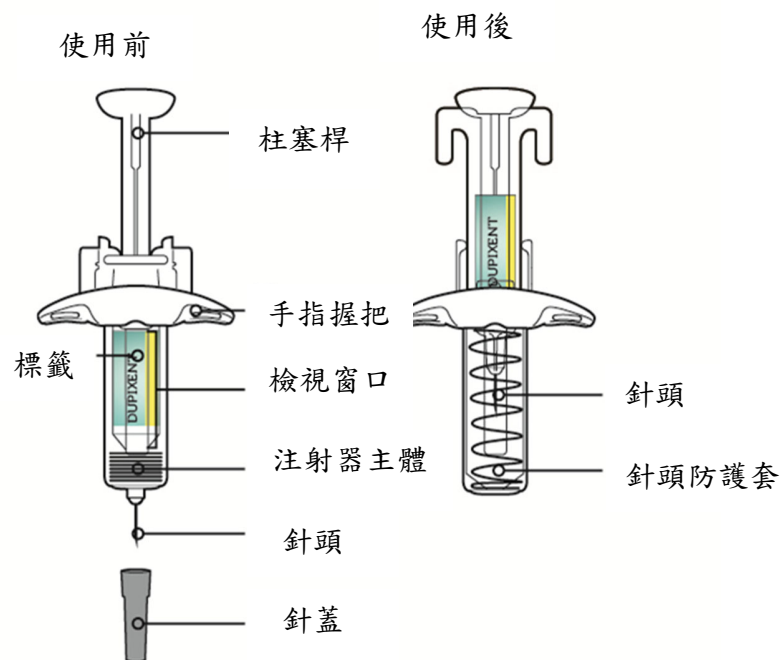

重要資訊

- 使用注射器之前，請先仔細閱讀所有說明。
- 若針蓋遺失或未確實套上，請勿使用該注射器。


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 詢問您的醫療人員，您應多久注射一次藥物。 • 每次注射都應更換注射部位。 • 若注射器掉落於堅硬表面或已損壞，請勿使用。 | <ul style="list-style-type: none"> • 除非您已準備好要注射，否則請勿碰觸柱塞桿。 • 請勿穿透衣物進行注射。 • 請勿去除注射器內的任何氣泡。 • 為了降低針扎的風險，每支預填注射器都有針頭防護套，它可在您進行注射後自動遮蔽注射針頭。 • 任何時間都不可反向拉回柱塞桿。 • 在您注射前請勿移除針頭防護套。 • 使用後請立即扔掉（處置）用過的 DUPIXENT 單劑量預充填注射器。請參閱下面的“步驟 13：處置”。 • 單劑量之預充填注射器不可重覆使用。 |
|--|--|

DUPIXENT 的儲存方式


- DUPIXENT 注射器及所有藥品應置於兒童無法觸及處。
- DUPIXENT 注射器應儲存於冰箱 36°F -46°F (2°C - 8°C)的環境中。
- 請將 DUPIXENT 注射器存放於原裝紙盒內，以防止光線照射。
- DUPIXENT 注射器可以在室溫最高至 25°C (77°F)的環境下保存 14 天。請丟棄（棄置）任何在室溫下放置超過 14 天的 DUPIXENT 注射器。
- 任何時間都不可震搖注射器。
- 注射器不可加熱。
- 注射器不可冷凍。
- 注射器不可直接照日光。

步驟 1：取出

從紙盒中取出注射器，握住注射器主體的中間部位。

 除非你已準備好要注射，否則不要拔除針蓋。

 若注射器已損壞，請勿使用。

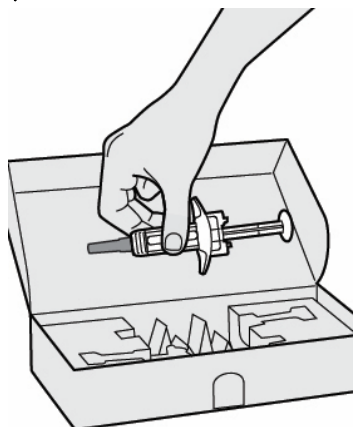

步驟 2：準備

確認您有下列物品：

- DUPIXENT 預填注射器
- 1 片酒精棉*
- 1 個棉球或 1 塊紗布*
- 尖銳物品處理容器* (見步驟 13)

*紙盒內不包含的物件



DUPIXENT 預填注射器



1 片酒精棉*



1 個棉球或 1 塊紗布*



尖銳物品處理容器*

步驟 3：檢查

當您收到您的 DUPIXENT 注射器時，請確認以下資訊：

- 檢查產品及劑量的正確性
- 單劑量預充填注射器尚在有效期限內



若注射器已超過有效期限，請勿使用。



有效日期


從注射器檢視窗口查看藥物：

檢查液體是否為澄清且為無色至淡黃色。

注意：您可能會發現氣泡；此屬正常現象。



若注射器內的液體變色或混濁，或含有肉眼可見的片狀物或顆粒，則請勿使用。

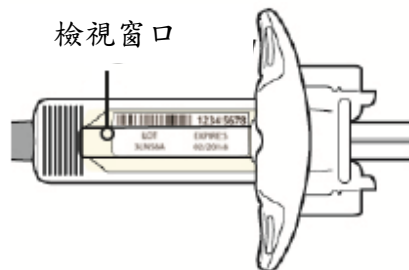

步驟 5：靜置 45 分鐘

將注射器靜置於平面上至少 45 分鐘，使其自然回溫至室溫。




注射器不可加熱。



注射器不可直接照日光。




請勿將 DUPIXENT 注射器在室溫下保存超過 14 天。請丟棄（棄置）任何在室溫下放置超過 14 天的 DUPIXENT 注射器。

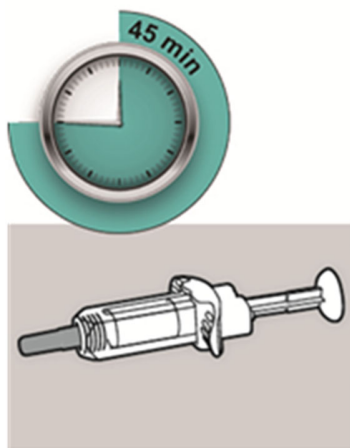




步驟 6：選擇注射部位

選擇注射部位。

- 您可注射於大腿或腹部，但肚臍半徑 2 吋(5 公分)以內的範圍除外。
- 若由他人為您注射，您也可以注射於外上臂。
- 每次注射皆應更換注射部位。

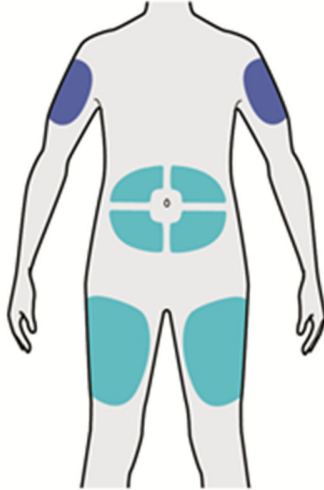 不要注射在敏感、受傷或有瘀青或結疤的皮膚上。



 自行注射或由照護者注射
 僅適用於照護者注射

步驟 7：清潔

清洗雙手。

以酒精棉清潔注射部位。


注射前先讓皮膚乾燥。

 注射前不得再次碰觸或吹氣於注射部位。




步驟 8：拔除針蓋

握住注射器主體的中間部位，針頭朝外並拔除針蓋。

 不可套回針蓋。


 不可碰觸針頭

拔除針蓋後應立刻注射藥物。

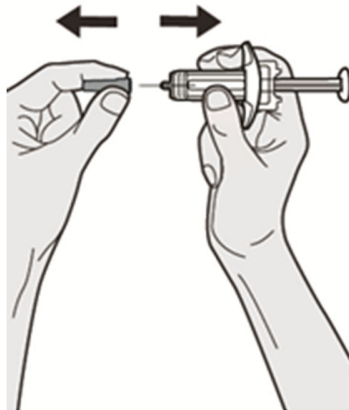


步驟 9：捏起

在注射部位捏起一個皮膚皺摺（於大腿或腹部的位置，肚臍周圍 2 英寸外，或如由醫護人員進行注射，則可於上臂的外部區域）。下圖為在胃上捏起一個皮膚皺摺的範例。

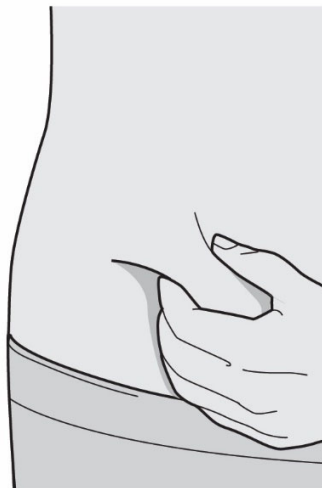

步驟 10：扎入

將針頭以大約 45 度角完全扎入皮膚皺摺處。

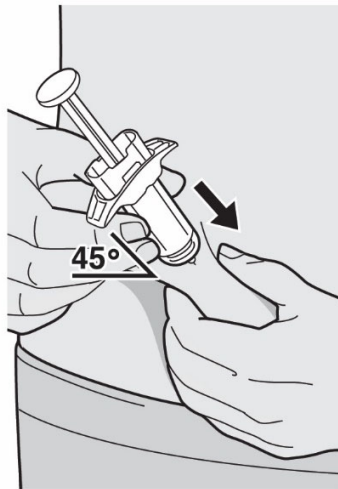

步驟 11：推入

放鬆捏起的皮膚。

將柱塞桿慢慢且穩定地推入，直到注射器內容物完全注入為止。

注意，您可能會感受到一些阻力。此屬正常現象。



步驟 12：釋放及移除

一旦針頭離開皮膚後，鬆開您的大拇指，使注射針頭縮回針頭防護套內。


若您有任何出血，可使用棉球或紗布輕壓注射部位。



不可套回針蓋。



注射後不要搓揉皮膚。

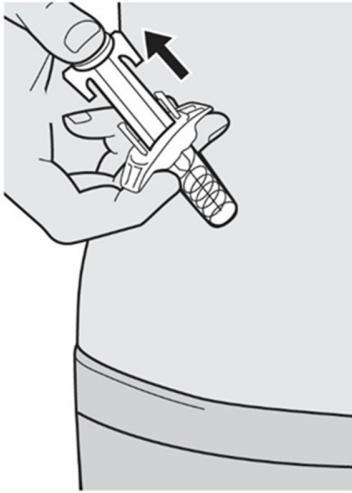

步驟 13：丟棄

使用過的針頭、DUPIXENT 注射器及針蓋應馬上丟入尖銳物品處理容器中。



注射器不可當成家庭垃圾處理(丟棄)。

若您沒有尖銳物品處理容器，您可使用具有下列特性的家用容器代替：

- 以耐用塑膠材質所製；
- 附有可緊閉、防穿刺的蓋子，使尖銳物不致於掉落，
- 使用時容器為直立且穩固，
- 防滲漏，且
- 貼有適當的標籤警告容器內有危險廢棄物

當您的尖銳物品處理容器快裝滿時，您應遵照社區規定正確處理您的尖銳物品處理容器。對於使用過的針頭及注射器之丟棄方式，當地法律可能有其規定。

除非您的社區規定允許，否則尖銳物品處理容器不可當做家庭垃圾處理。您的尖銳物品處理容器不可回收使用。



不可套回針蓋。



永遠將容器置於兒童無法觸及處。



USPI May 2020